



PRODUCCIONES MULTIPLES MODERNAS S.A.



Carretera a Reynosa Km.12 Guadalupe, N.L. México
Tel: +52 (81) 83-26-16-58 y 46, C.P. 67195
www.prommsa.com.mx twitter.com/PROMMSA

CARETA DE PROTECCION FACIAL

Modelo: CRT-PF01



Equipo de Protección Personal (EPP). Careta de Protección Facial completa, protege ojos, nariz y boca. Cuenta con resistente arnés flexible de larga duración fabricado en **Acero Inoxidable**. Carátula protectora desmontable fabricada en PETG (Tereftalato de Polietileno Glicol).

Este equipo es utilizado por los trabajadores sanitarios en la industria médica, dental y veterinaria para proteger el área facial y las membranas mucosas asociadas como los ojos, nariz y boca de cualquier salpicadura de fluidos corporales.

El uso de los protectores faciales abarca varias industrias que tienen que lidiar con residuos contaminados como lo son los trabajadores de laboratorios, intendencia, paramédicos, policía, bomberos y el personal que esté expuesto a alguna posible fuente de infección.

Nota IMPORTANTE: Este producto no sustituye el uso de un cubre bocas desechable contra partículas ni gafas de seguridad.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Arnés flexible en **Acero Inoxidable**.
- Acabado en pintura electrostática de horno.
- Carátula protectora de PETG.
- Soportes en silicón vulcanizado.
- Cordón elástico para sujeción.
- Espesor de protector: 0.5 mm (0.020")

VENTAJAS SOBRE OTRAS CARETAS

- Se puede limpiar y desinfectar numerosas veces.
- Carátula fácil de desmontar.
- Carátula desinfectable usando jabón líquido o desinfectantes hospitalarios.
- Elástico fácilmente desmontable y lavable.
- Reducción de desechos médicos peligrosos.
- Al ser desinfectable y reutilizable tiene un Ciclo de vida largo.
- El arnés metálico se puede desinfectar en Autoclave.
- Fabricado en materiales NO porosos, NI esponjosos, NO guarda residuos.
- Refacciones individuales, se pueden ordenar por separado.
- Compatible o adaptable con otras carátulas.
- Los agujeros de montaje coinciden con los de una perforadora de 3 agujeros.

ARNÉS METÁLICO FLEXIBLE

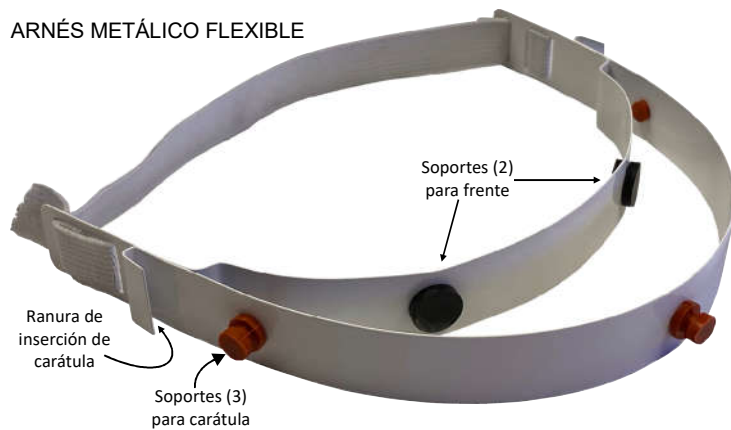


La carátula se envía extendida, recomendamos enrollarla (ver imagen) por 1 día, para que esta obtenga una curvatura más natural.

No retire la capa protectora al enrollar, solo retirela al colocar en el arnés.



AJUSTE DEL ELÁSTICO

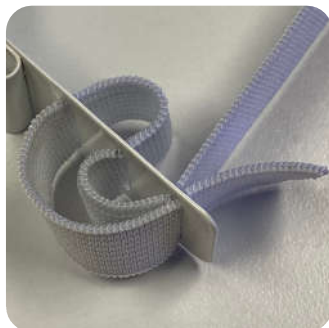

Ajuste el tensión del elástico según sus requerimientos.

Siga la ruta del elástico a través de las ranuras para asegurar la tensión del elástico.

Su diseño permite combinarse con **Casco de Seguridad o Gorra Común**

